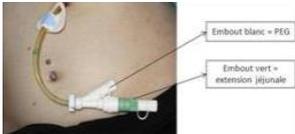


Stomies d'alimentation

Avvertissements : La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par du personnel qualifié. La forme et le contenu de ce document doivent faire l'objet d'amélioration continue dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

	Gastrostomie percutanée endoscopique PEG	Gastrostomie percutanée endoscopique avec extension jéjunale PEG-J	Gastrostomie percutanée par gastropexie (GPR / Pexact)	Gastrojéjunostomie percutanée radiologique avec extension jéjunale (GPR-J)	Jéjunostomie chirurgicale	Bouton de gastrostomie et gastrotube	Bouton de gastrostomie et gastrotube avec extension jéjunale
Définition	Stomie équipée d'une sonde d'alimentation mise en place dans l'estomac par voie endoscopique et percutanée.	Stomie équipée d'une sonde d'alimentation dont l'extrémité distale est placée dans le jéjunum à travers la PEG par voie endoscopique et percutanée.	Stomie équipée d'une sonde d'alimentation mise en place dans l'estomac sous contrôle radiologique (GPR) ou endoscopique (Pexact).	Stomie équipée d'une sonde d'alimentation dont l'extrémité distale est placée au niveau du jéjunum sous contrôle radiologique à travers une gastrostomie percutanée faite par gastropexie.	Stomie équipée d'une sonde d'alimentation mise en place dans le jéjunum par laparotomie.	Sondes d'alimentation mises en place dans l'estomac qui permettent de remplacer dès 6-8 semaines une sonde de gastrostomie chirurgicale, endoscopique ou radiologique.	Sondes d'alimentation mises en place dans le jéjunum à travers la gastrostomie qui permettent de remplacer dès 6-8 semaines une PEG-J ou une GPR-J. Version tube 1 voie 2 voies
							 

Titre : Stomies d'alimentation

Référence : DSO-TS -Adultes-003

Version : 1.2

Date d'application : 29/11/2022

Indications	Alimentation orale impossible ou insuffisante avec un tube digestif fonctionnel	Alimentation orale impossible ou insuffisante avec un tube digestif haut non fonctionnel	Alimentation orale impossible ou insuffisante avec un tube digestif fonctionnel	Alimentation orale impossible ou insuffisante avec un tube digestif haut non fonctionnel	Alimentation orale impossible ou insuffisante avec un tube digestif haut non fonctionnel. Nutrition postopératoire après oesophagectomie ou gastrectomie totale.	Alimentation orale impossible ou insuffisante avec un tube digestif fonctionnel et impliquant une nutrition entérale à long terme	Alimentation orale impossible ou insuffisante avec un tube digestif haut non fonctionnel et impliquant une nutrition entérale à long terme
Soins post-pose J0-J16	Se référer aux Méthodes de soins complètes						
	PEG	PEG-J	GPR	GPR-J	Jéjunostomie chirurgicale	Bouton/gastrotube	Bouton/gastrotube avec extension jéjunale
Soins quotidiens dès J16	Laver au savon, rincer à l'eau et bien sécher Laisser la stomie à l'air ; jamais de compresses entre la peau et la plaque de fixation NB : même en cas de non utilisation de la stomie				N/A	Laver au savon, rincer à l'eau et bien sécher Laisser la stomie à l'air ; jamais de compresses entre la peau et la plaque de fixation NB : même en cas de non utilisation de la stomie	
Mobilisation	<ul style="list-style-type: none"> Va et vient 1-5cm Rotation 360° sonde Traction puis adhérence 	<ul style="list-style-type: none"> Va et vient 1-5cm Rotation 360° sonde Traction puis adhérence 	<ul style="list-style-type: none"> Va et vient 1-5cm Rotation 360° sonde Traction puis adhérence 	<ul style="list-style-type: none"> Va et vient 2-3cm PAS de rotation sonde Traction puis adhérence 	N/A	Bouton : <ul style="list-style-type: none"> rotation 360° sonde uniquement Gastrotube : <ul style="list-style-type: none"> Va et vient 1-5cm Rotation 360° sonde Traction puis adhérence 	Bouton-J : <ul style="list-style-type: none"> Va et vient vers l'intérieur de l'estomac Gastrotube-J : <ul style="list-style-type: none"> Va et vient 1-5cm Traction puis adhérence
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Suture à la peau ou Statlock®	Bouton : N/A Gastrotube : adhésif	Bouton-J : N/A Gastrotube-J : adhésif
Pansement	N/A	N/A	N/A	N/A	Aux 3 jours	N/A	N/A
Rinçage	1x/j minimum avec 20ml eau minérale	1x/j minimum avec 20ml eau minérale	1x/j minimum avec 20ml eau minérale	1x/j minimum avec 20ml eau minérale	1x/j minimum avec 20ml eau minérale	1x/j minimum avec 20ml eau minérale	1x/j minimum avec 20ml eau minérale
Débit max.	Selon tolérance	≤ 80ml/h NB : nutrition entérale se fait sur la voie jéjunale (connexion verte et violette)	Selon tolérance	≤ 80ml/h	≤ 80ml/h	Selon tolérance	≤ 80ml/h